


エチレンオキシドガス供給量監視システム

# ステリトレーシング®

ステリトレーシング®とは、お客様が望む作業工程を最大限に取り入れ  
当社が独自に開発、構築したガス供給量監視システムです。

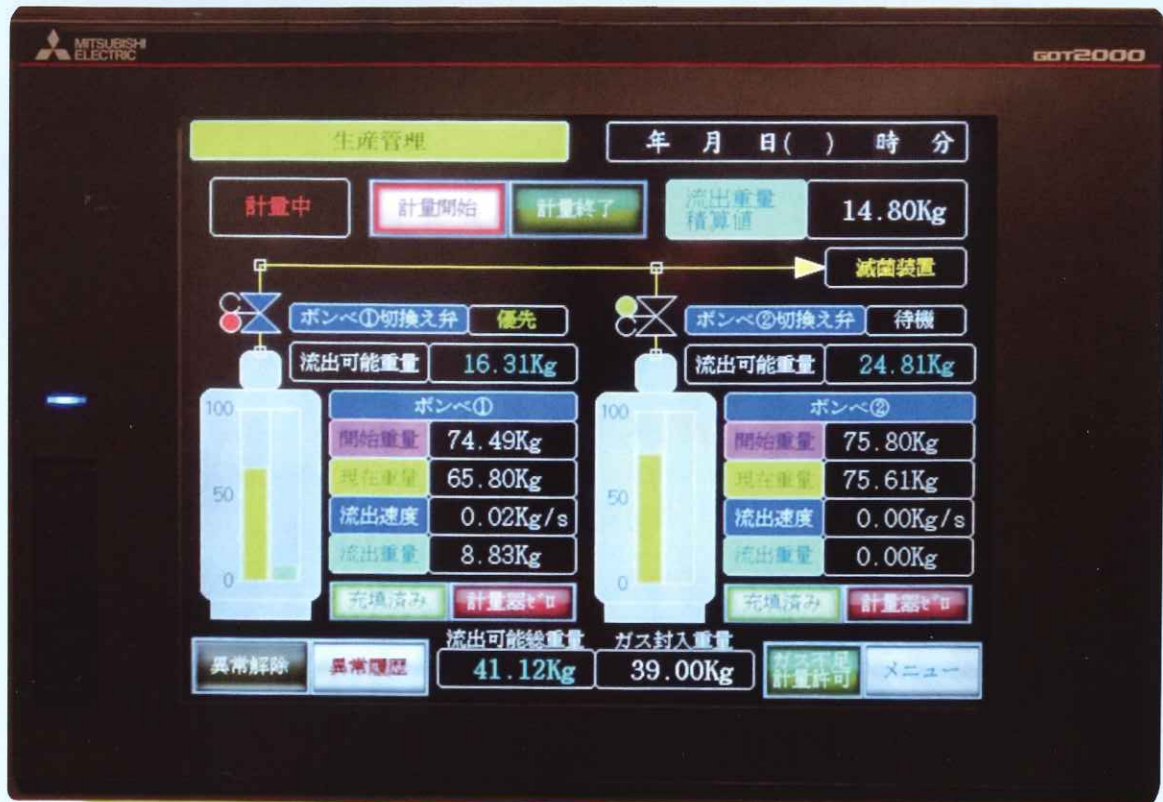

ガスを無駄にしませんか？

お気軽にご相談ください。  
貴社のご要望にあわせて、  
提案書及び見積書を  
作成させていただきます。



株式会社 ステリテック



時代のニーズに応える「滅菌ガス：滅菌装置」を永年、開発しているステリテックならではのノウハウです。きめの細かな制御方法をお客様独自の要望に合わせて仕様を構築することで滅菌作業状況の確認を判断する事が出来ます。

## 特徴

### ■ガス投入状況が一目で判るタッチパネル方式です。

タッチパネル内の表示は、ポンペ毎に図式化され的確に表示します。

### ■自動でポンペ切替ができる。

必要なガス量を正確に計測し、設定されたガス量供給後はエアバルブ制御によって自動で切替が行われ、手間もかからず作業工程時間を短縮出来ます。

### ■ポンペは複数本まで対応可能です。

お客様の要望により1本より、ご希望の本数での対応が可能です。

### ■スペースを取らないコンパクトなロードセル仕様です。

ポンペ2本立て集合装置寸法 (W1,200×D600×H1,850) と小型で、厚さ30mmの付属専用プレート (SUS製傾斜板) を使用する事でスムーズにポンペ交換が出来ます。


### ■携帯端末に状況を知らせる事が出来ます。

現場から離れた場所に居ても、携帯端末に連動させ異常などの状況を知らせ安全確認が出来ます。

### ■滅菌庫内のエチレンオキシド濃度 (mg/L) の計算も可能です。



## ■ステリトレーシング® 基本ユニット構成図

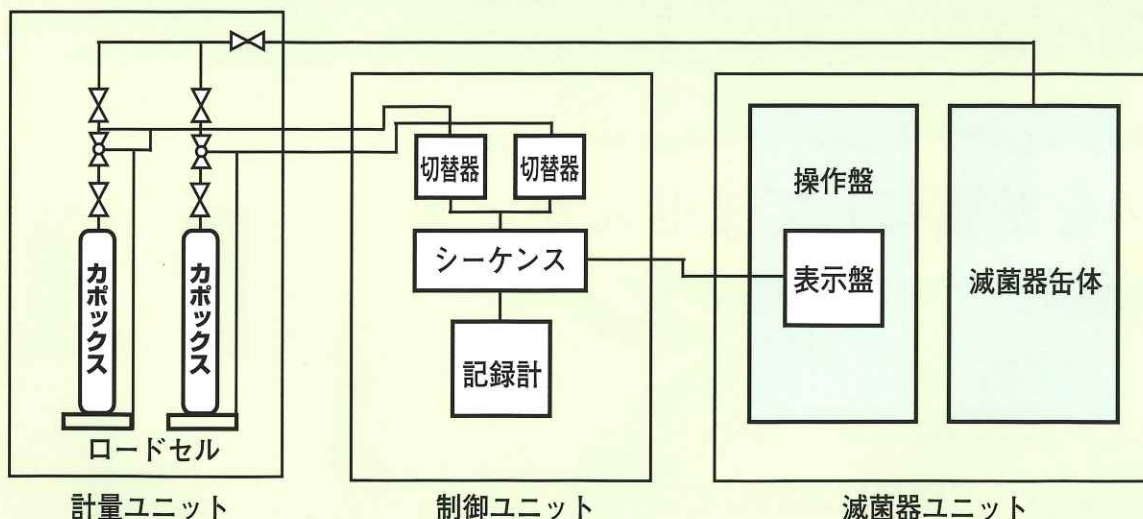

【製品主仕様】 切替可能流体：エチレンオキシド+炭酸ガス 機器重量：10kg 材質：SUS304 電源：100V、2φ、0.1kw



本 社 〒347-0032 埼玉県加須市花崎 5-13-1  
TEL(0480)67-0290(代) FAX(0480)67-0293  
<http://steri-tech.co.jp>

東日本支店 〒347-0032 埼玉県加須市花崎 5-13-1  
TEL(0480)67-0290(代) FAX(0480)67-0293  
西日本支店 〒651-2228 兵庫県神戸市西区見津が丘 2-4-7  
TEL(078)994-4200(代) FAX(078)994-4210  
中部営業所 〒497-0033 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江本町  
字エノ割3-1 日本液炭(株)中部支社内  
TEL(0567)96-5160 FAX(0567)96-5160