



- EOガスによる滅菌処理●
- 滅菌バリデーション●
 - 各種細菌検査●
 - ガスの残留分析●


株式会社 ステリテック

本社・工場 〒347-0032 埼玉県加須市花崎5-13-1
 TEL 埼玉 (0480) 67-0290 (代)
 神戸支店 〒651-2228 神戸市西区見津が丘2-4-7
 TEL 神戸 (078) 994-4200 (代)
<http://www.steri-tech.co.jp>



めっきん

当社では、ガス滅菌装置を設置し
 医療用具・衛生材料・化粧品等容器、
 器材の受託滅菌及び滅菌バリデー
 ション業務並びにガスの残留分析
 を行っております。

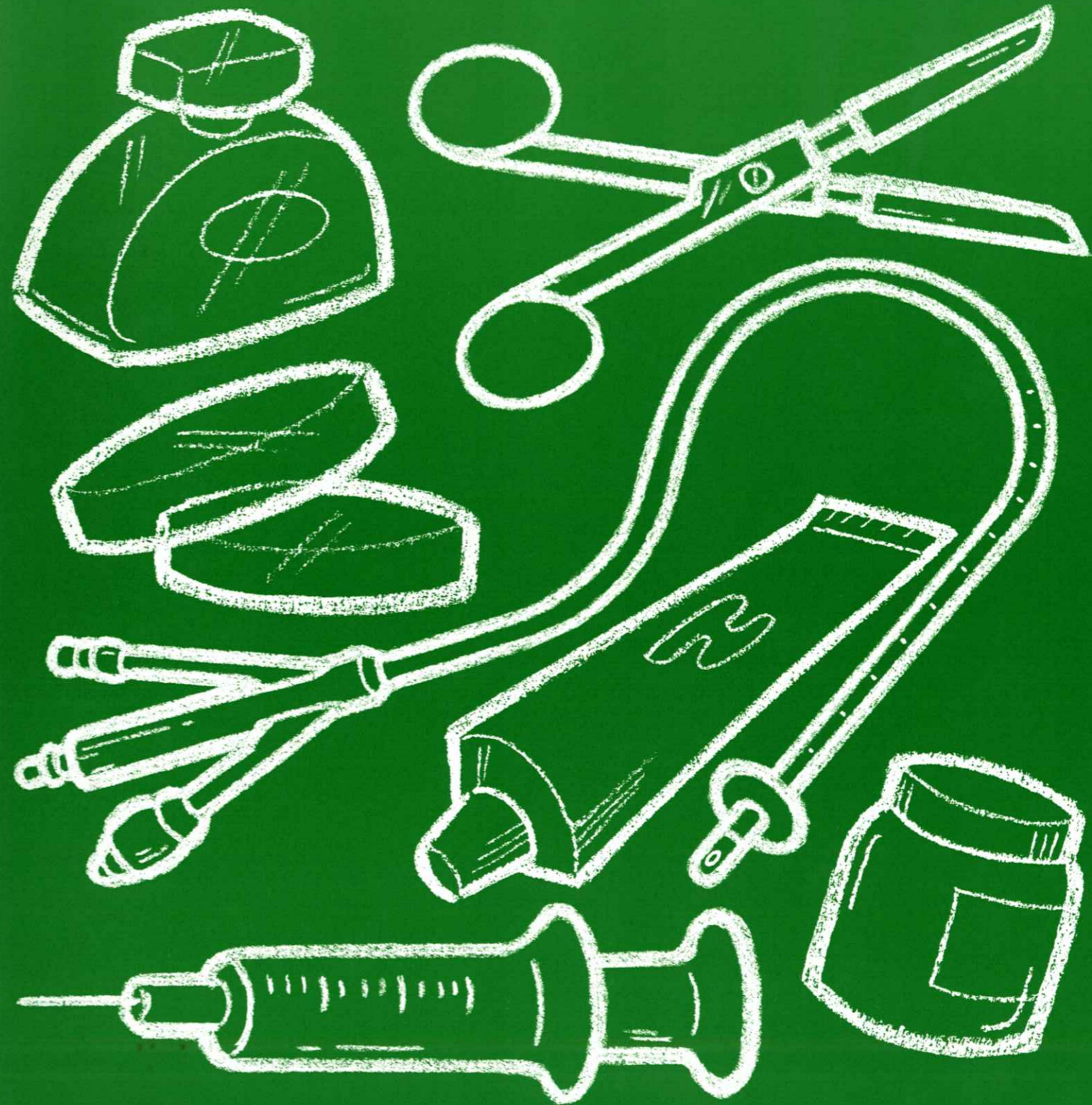

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています

受託滅菌の手順

事前テスト

医療用具

- 1.バリデーション
- 2.製造承認

医療用具以外

- 被滅菌物の材質形状
- 1.包材のチェック
 - 2.滅菌テスト
 - 3.滅菌効果の測定
 - 4.残留分析
 - 5.滅菌条件の決定

ご契約

1週間前

受注

前日or当日

搬入

滅菌

翌日

滅菌チェック

お引渡し

受託滅菌業務


日本におけるEOガス滅菌の歴史は、当社の歴史そのものと言っても過言ではないと自負しております。

すなわち、当社が昭和38年わが国初の滅菌ガス(カボックス・エボン)とガス滅菌装置の販売を目的として設立されて以来、医療用ディスポ製品をはじめ医薬品・化粧品分野での滅菌に急速に普及し、今日に至っております。

当社では、これまでのノウハウを生かし、ガス滅菌装置を設置の上、受託滅菌業務を承っております。

なお、当社埼玉営業所では滅菌バリデーション業務や各種の細菌検査・ガスの残留分析も行っております。当社係員までお問い合わせ下さい。


滅菌設備

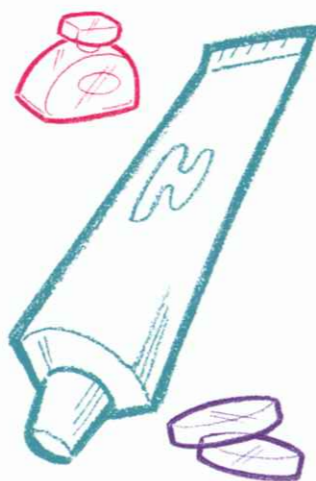

自動開閉式ドア



触媒燃焼式EOガス処理装置

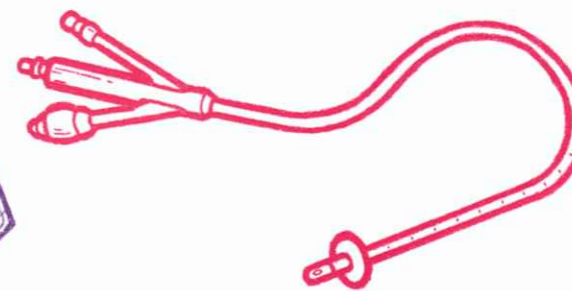

医療用具

滅菌バリデーション手順

(ハーフサイクル法)

1. バリデーション手順書の作成
2. バリデーション実施計画書の作成
3. 設備適格性の確認
4. 稼働性能適格性の確認
5. バリデーション結果報告書の作成
6. 委託受託契約書の作成



製造設備

EOG滅菌装置

エアレーター

排ガス処理設備

バリデーション用計測機器

医療用具製造業許可番号
28BZ6013(神戸支店)
11BZ0658(埼玉営業所)